


ProTrack


Pigtail-Draht

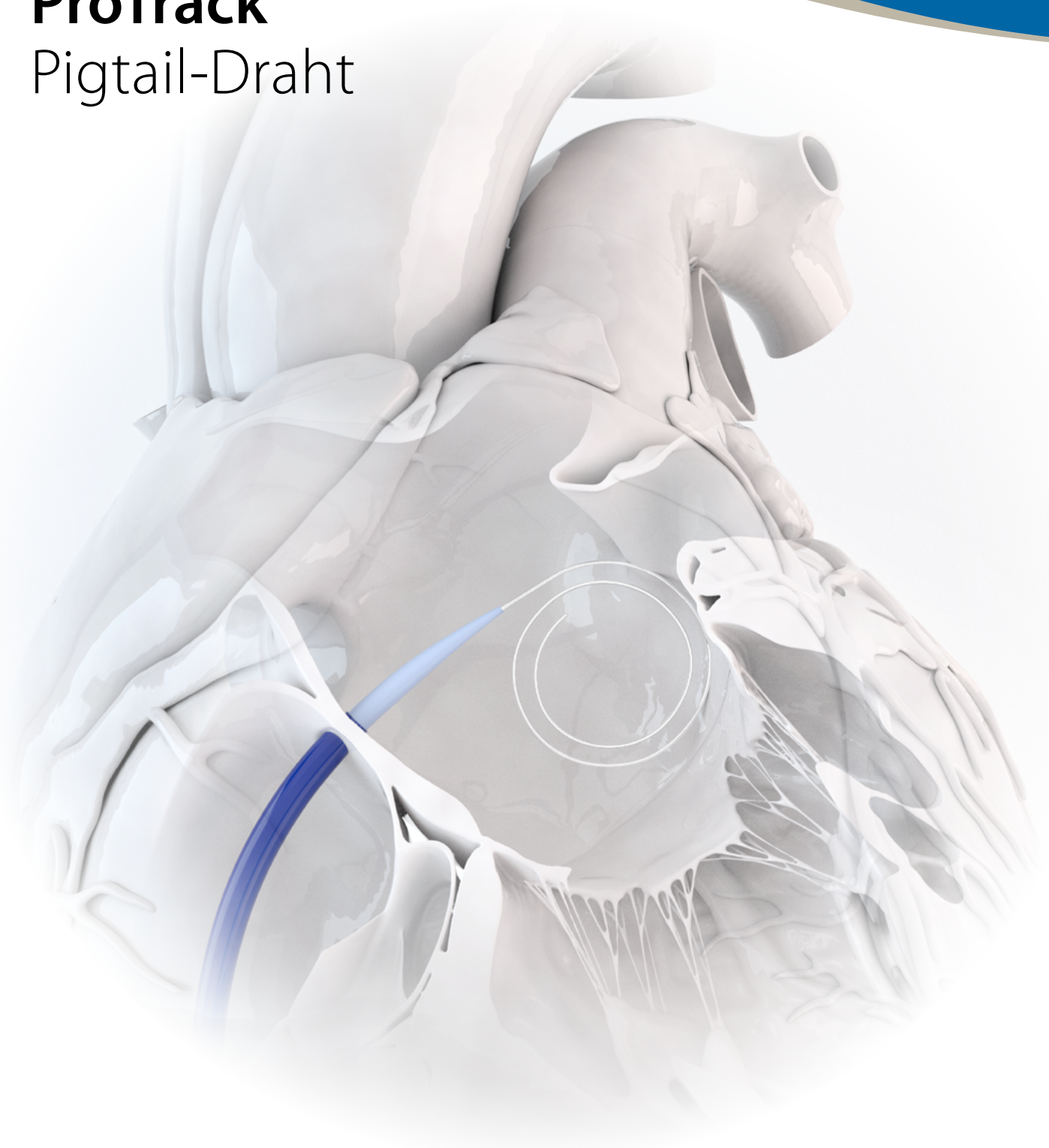

UNMITTELBARE VERANKERUNG. SICHERER ZUGANG.

ProTrack Pigtail-Draht

Effizienter Zugang zum linken Vorhof durch flexible spiralförmige Spitze. Unterstützt den Austausch großer Schleusen und das Abfedern an der Wand des linken Vorhofs.

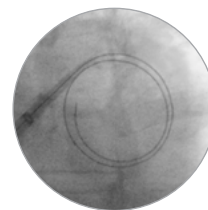


Röntgendichter
Draht




Sparen Sie Zeit

Schnellere Einführung von Instrumenten in den linken Vorhof.¹ Für einen sofortigen verankerten Zugang zum linken Vorhof den Pigtail-Draht einfach entfalten.

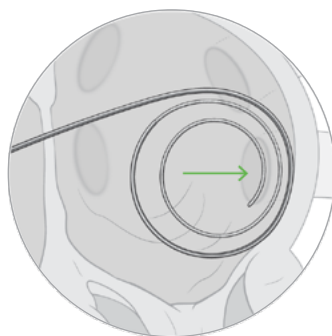

Flexibles Abfedern

Die flexible, atraumatische Spitze ermöglicht ein sanftes Abfedern an der Wand des linken Vorhofs.

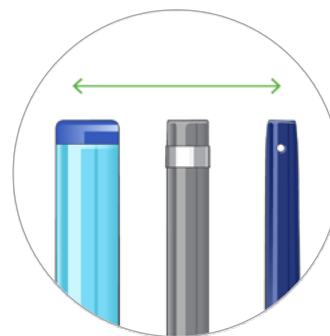

Austausch und Unterstützung

Der steife Edelstahlkörper erleichtert den Austausch großer Schleusen und stabilisiert die Schleuse.

SPEZIFIKATIONEN

Merkmal	Spezifikationen
Außendurchmesser	0,025 Zoll
Gesamtlänge	175 cm, 230 cm
Funktionale Austauschlänge	152 cm, 207 cm
Federspulenlänge	13 cm
Spiralendurchmesser	4,1 cm
Schaftmaterial	Edelstahl
Spulenmaterial	Edelstahl

BESTELLINFORMATIONEN

Gesamtlänge	Produktbezeichnung
175 cm	PTW-25-175
230 cm	PTW-25-230

¹Buchner S, et al. J Interv Cardiol. doi: 10.1111/joic.12224

PRM-00041 DE J-1,2,3 V-4 © Copyright Baylis Medical Company Inc., 2013-2020. Baylis Medical Company Inc. behält sich Änderungen an Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung und ohne jegliche Verpflichtung bezüglich zu einem früheren Zeitpunkt hergestellten oder ausgelieferten Produkten vor. ProTrack, 'UNMITTELBARE VERANKERUNG. SICHERER ZUGANG' und das Logo von Baylis Medical sind Marken oder eingetragene Marken von Baylis Medical Company Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. VORSICHT: In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden. Vor Gebrauch die Produktauszeichnung und die Packungsbeilagen auf Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warn- und Vorsichtshinweise sowie Gebrauchsanweisungen durchsehen.