


SureFlex

steuerbare Führungsschleuse



Feinfühliges
TruGlide™ Steuerung

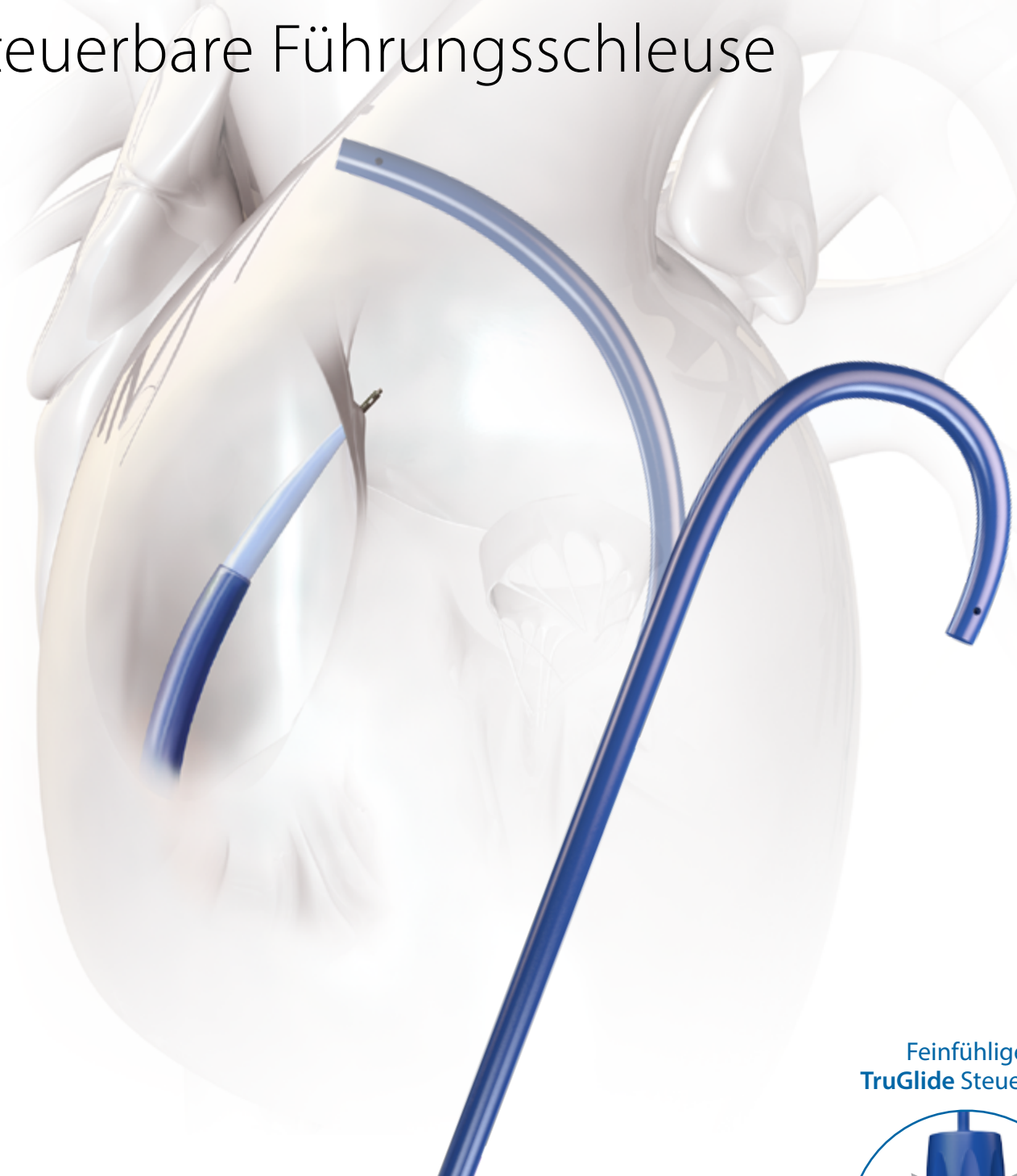

SPÜRBARE KONTROLLE. SICHTBARE ERGEBNISSE.

SPÜRBARE KONTROLLE. SICHTBARE ERGEBNISSE.

Die **SureFlex** steuerbare Schleuse wurde für maximale Kontrolle über den gesamten Eingriff entwickelt.

Buchen Sie einen Fall mit einem unserer klinischen Spezialisten, um die Kontrolle selbst zu erleben.



Kontrollierte Punktion

Das fortschrittliche Design von Schleuse und Dilatator ermöglicht einen sanften und gleichmäßigen Zugang und eine besser vorhersagbare Punktionsstelle.*



Präzise Steuerung

Fühlen Sie die Krümmung, kennen Sie die Position. Erzielen Sie maximale Präzision und Kontrolle* mit **TruGlide** Führung und intuitiver taktiler Rückmeldung.



Zuverlässige Leistung

Spezielles Design für einen gleichbleibenden Kontakt kardiovaskulärer Katheter sowie höchste Stärke und Beständigkeit.*

ERFOLG



Konsistente Kontaktkraft

Unterstützt konsistente Kontaktkraft von Kathetern.^{1*} Eine konsistente Kontaktkraft von Ablationskathetern bietet bessere therapeutische Ergebnisse.²

Stärke und Beständigkeit

Hohe Leistung; bessere Beständigkeit als das führende Mitbewerberprodukt.*

Spezielles Design zur Beibehaltung der Krümmung während des Eingriffs.



Selbsteinrastender Drehknopf

Bleiben Sie in Position – zielgenaue Therapie dank Drehknopf, der die Spitzenkrümmung beibehält.


JEDES MAL.

PUNKTION

Zuverlässig punktieren


Zuverlässigen Zugang erzielen:

- **27 %** geringere Spitzenkraft für die Perforation und ein sanfteres Profil.*

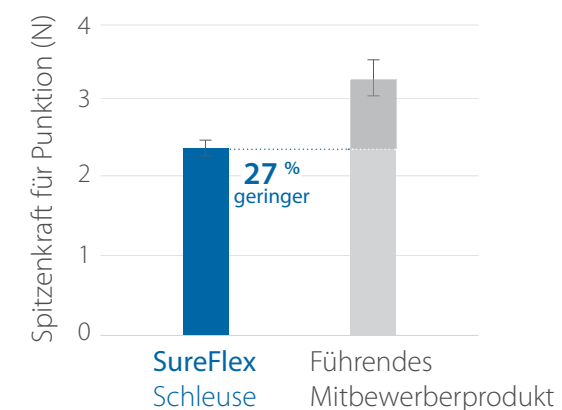

Glatter Übergang

40 % glatterer Übergang zwischen Dilator und Schleuse als das führende Mitbewerberprodukt* für eine einfachere, sanftere Punktion.

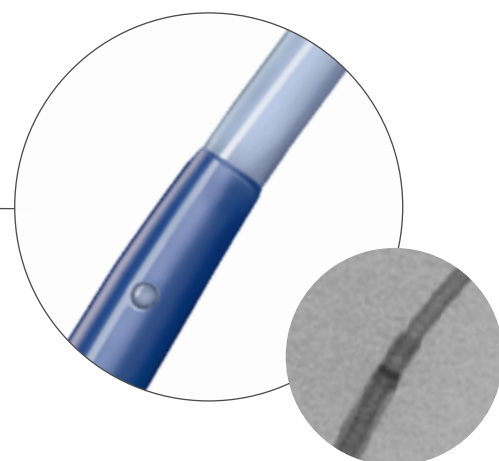

Röntgendichte Spitze

Kontrollieren Sie die Position durch Visualisierung der Schleusenspitze während des Eingriffs.


ZIELEN

Feinfühlige TruGlide Steuerung

Reibungslose, hochpräzise Steuerung für die zuverlässige Positionierung der Krümmung.


Taktile Rückmeldung

Fühlen Sie das Ausmaß der Krümmung dank intuitiver taktiler Rückmeldung.

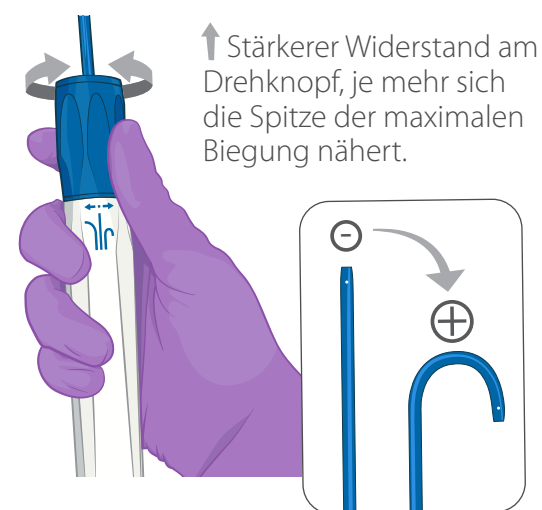

Kontrollierte Drehkraft

Akkurate Positionierung dank 1:1-Drehmomentübertragung* durch umflochtenes Kompositdesign.

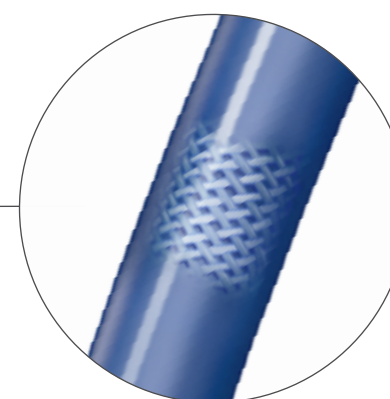

ERFOLG


Konsistente Kontaktkraft

Unterstützt konsistente Kontaktkraft von Kathetern.^{1,*} Eine konsistente Kontaktkraft von Ablationskathetern bietet bessere therapeutische Ergebnisse.²

Stärke und Beständigkeit

Hohe Leistung; bessere Beständigkeit als das führende Mitbewerberprodukt.*

Spezielles Design zur Beibehaltung der Krümmung während des Eingriffs.

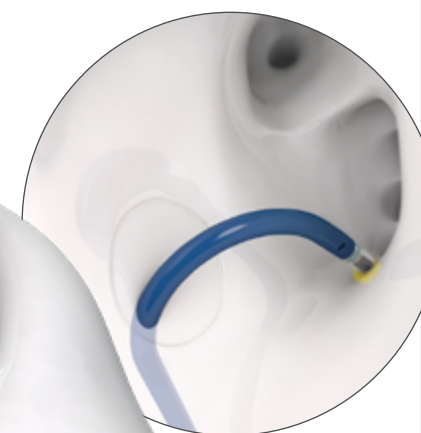


Selbsteinrastender Drehknopf

Bleiben Sie in Position – zielgenaue Therapie dank Drehknopf, der die Spitzenkrümmung beibehält.

* Basierend auf in F&E-Laboren von Baylis Medical Company Inc. durchgeführten Leistungsbewertungen. Die Ergebnisse lassen nicht notwendigerweise Rückschlüsse auf die klinische Leistung zu.

JEDES MAL.

SureFlex steuerbare Führungsschleuse

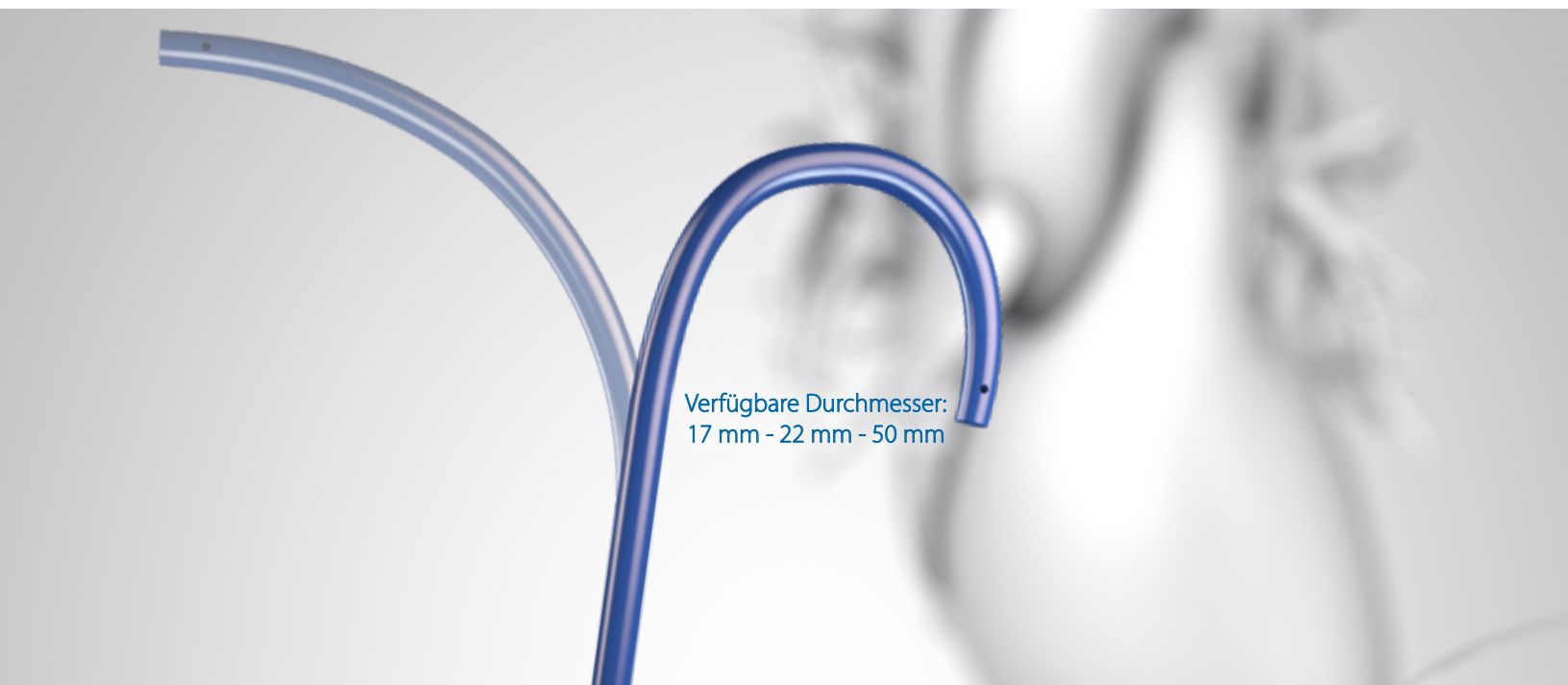

SPEZIFIKATIONEN

Merkmal	Spezifikation
Kompatibel mit den French-Größen	8.5F (2.8 mm)
Nutzlänge der Schleuse	72 cm
Gesamtlänge der Schleuse	92 cm
Röntgendichte Markierung der Schleuse	Platin-/Iridiumstreifen
Nutzlänge des Dilatators	95 cm
Länge des Führungsdrahts	180 cm
Kompatibler Führungsdraht	0.032" (0.81 mm)
Birdirektionale Krümmungswinkel	90° gg. Uhrzeigersinn, 180° im Uhrzeigersinn

BESTELLINFORMATIONEN

Produktnummer	Durchmesser der distalen Krümmung
TSK85-32-BD-71S	Klein (17 mm)
TSK85-32-BD-71M	Mittel (22 mm)
TSK85-32-BD-71L	Groß (50 mm)



¹ Brunelli M, et al. Europace. doi: 10.1093/europace/eur333

² Piorowski C, et al. Circ Arrhythm Electrophysiol. doi: 10.1161/CIRCEP.110.957761

PRM-00106 DE J-0 V-7 © Copyright Baylis Medical Company Inc., 2017-2022. Baylis Medical Company Inc. behält sich Änderungen an Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung und ohne jegliche Verpflichtung bezüglich zu einem früheren Zeitpunkt hergestellten oder ausgelieferten Produkten vor. SureFlex, TruGlide, 'Feel Control. See Results' und das Logo von Baylis Medical sind Marken oder eingetragene Marken von Baylis Medical Company Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Patente angemeldet und/oder ausgegeben. VORSICHT: In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden. Vor Gebrauch die Produktauszeichnung und die Packungsbeilagen auf Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warn- und Vorsichtshinweise sowie Gebrauchsanweisungen durchsehen.

Die gezeigten Produkte dürfen nicht in allen Ländern zugelassen werden.

Baylis
MEDICAL

Baylis Medical Company Inc.
5959 Trans-Canada Highway
Montreal, QC Canada H4T 1A1

Tel.: (514) 488-9801 / Fax: (514) 488-7209
www.baylismedical.com / info@baylismedical.com