


TorFlex


Transseptale Führungsschleuse

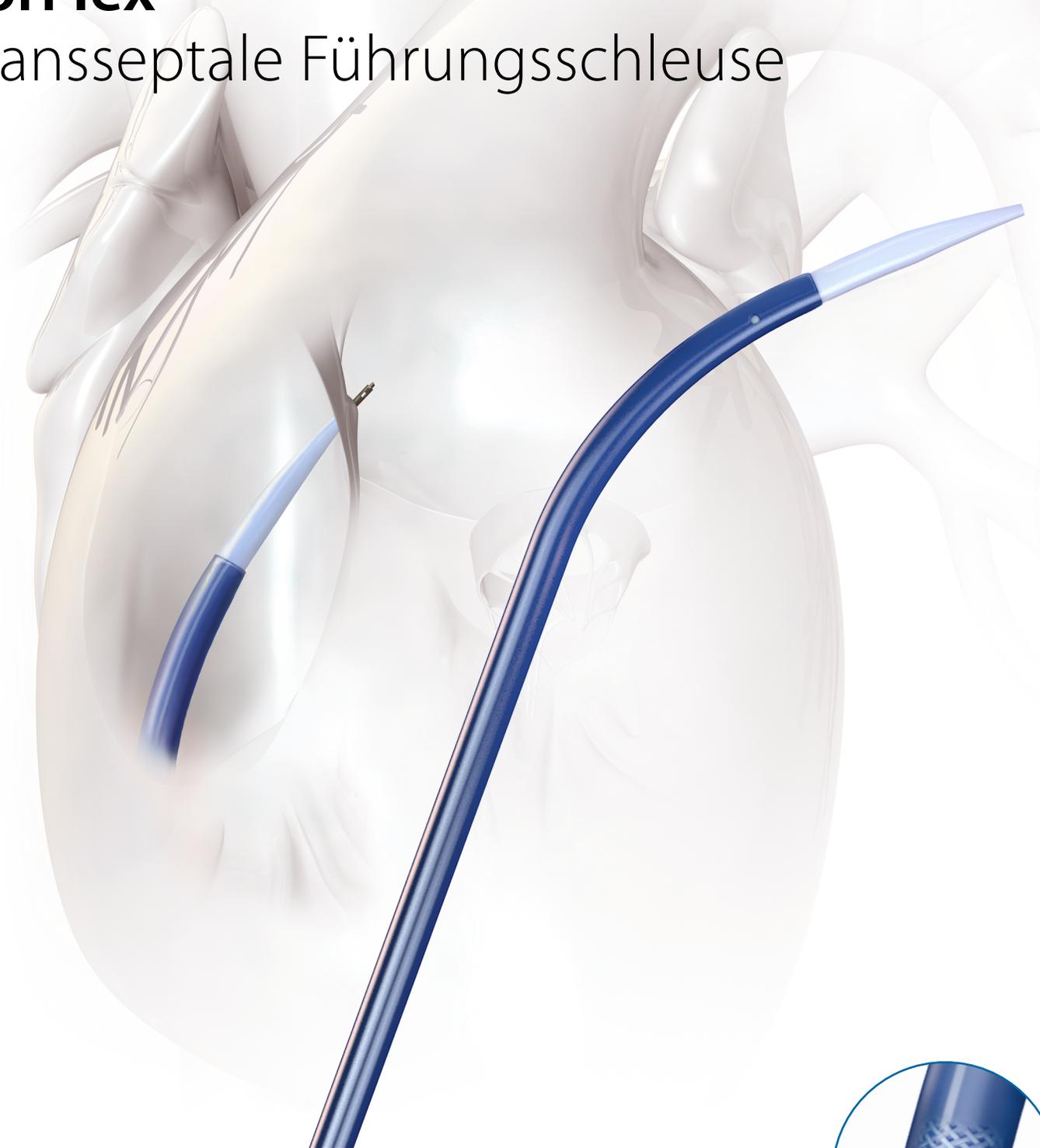


REIBUNGSLOSES UND KONTROLLIERTES PASSIEREN.

TorFlex Transseptale Führungsschleuse


Baylis Medical widmet sich innovativen Lösungen für transseptale Punktionen. Unsere transseptalen Produkte sind für eine reibungslose und kontrollierte transseptale Punktion ausgelegt.

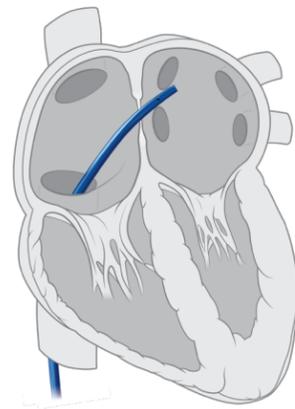


37° Krümmung
Linker Vorhof — posterior

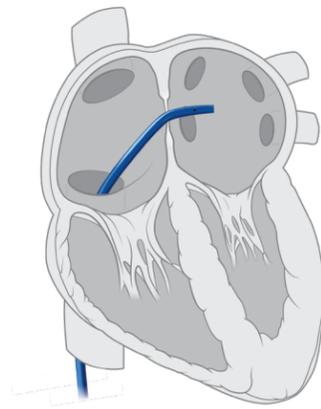


45° Krümmung
Linker Vorhof — posterior

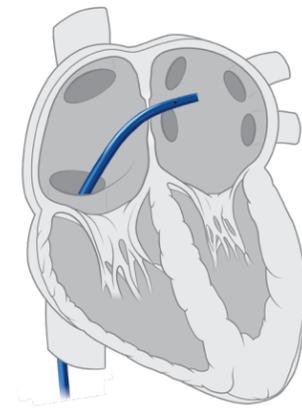

55° Krümmung
Linker Vorhof — posterior

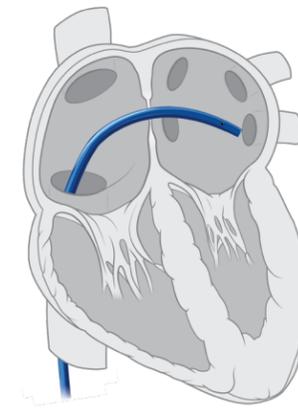

90° Krümmung
Linker Vorhof — inferior

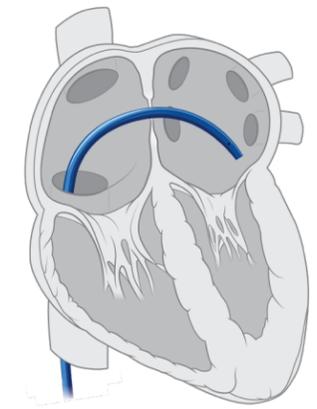

135° Krümmung
Linker Vorhof — inferior

Zuverlässiger und konsistenter Schnappmechanismus am Katheter-Hub

Hämostaseventil
Verhindert Rückfluss und Lufteintritt

Seitenanschluss
Auf die distale Krümmung ausgerichtet

Drei-Wege-Absperrhahn
Für Spülung und Aspiration

Kontrollierte Drehkraft

- Speziell umflochtenes Kompositdesign für ideale Dreheigenschaften
- Präzise Manipulationsreaktion von Katheter und Schleuse im linken Vorhof

Glatter Übergang

- Dünnes Wandprofil für einen glatten Übergang zum Dilatator
- Reibungsloser Vorschub durch das Septumgewebe in den linken Vorhof

Weder Seitenlöcher
Schutz vor Lufteintritt

Weiche Spitze
Atraumatische distale Spitze

Röntgengedichteter Markierungsstreifen

- Bessere Sichtbarkeit unter Durchleuchtung und im Ultraschall

Kontrollieren Sie die Position durch Visualisierung der Schleusen- und Dilatatorspitze während des Eingriffs

TorFlex Transseptale Führungsschleuse

Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation
Kompatibel mit den French-Größen	8,5 F (2,84 mm)
Nutzlänge der Schleuse	63 cm, 81 cm
Röntgendichte Markierung der Schleuse	Platin-/Iridiumstreifen
Schleusenkrümmungen	37°, 45°, 55°, 90°, 135°
Nutzlänge des Dilatators	67 cm, 85 cm
Innendurchmesser des Dilatators	0,83 mm (0,033 Zoll)
Max. Außendurchmesser des Führungsdrahts	0,81 mm (0,032 Zoll)
Länge des Führungsdrahts	180 cm

Bestellinformationen

Kompatibel mit den French-Größen


	Max. Außendurchmesser des Führungsdrahts		Nutzlänge der Schleuse		Schleusenkrümmung	
	32	37	63	81	37	45
TF85	-	32	-	63	-	37
TF85	-	32	-	63	-	45
TF85	-	32	-	63	-	55
TF85	-	32	-	63	-	90
TF85	-	32	-	63	-	135
TF85	-	32	-	81	-	45
TF85	-	32	-	81	-	55

Krümmung

Spitzwinklige Krümmung



Glatte Krümmung

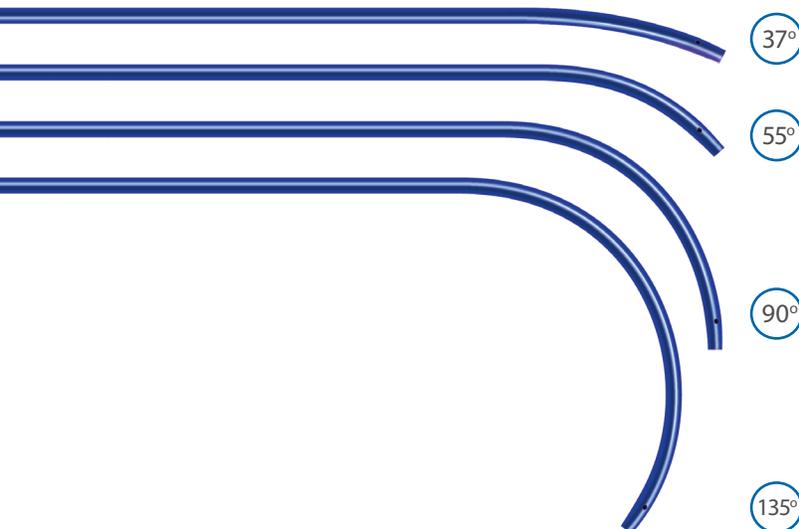

PRM-00107 DE J-0 V-8 © Copyright Baylis Medical Company Inc., 2012-2022. Baylis Medical Company Inc. behält sich Änderungen an Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung und ohne jegliche Verpflichtung bezüglich zu einem früheren Zeitpunkt hergestellten oder ausgelieferten Produkten vor. TorFlex, 'STUFENLOSER UND KONTROLLIERTER ÜBERGANG' und das Logo von Baylis Medical sind Marken oder eingetragene Marken von Baylis Medical Company Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. VORSICHT: In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden. Vor Gebrauch die Produktauszeichnung und die Packungsbeilagen auf Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warn- und Vorsichtshinweise sowie Gebrauchsanweisungen durchsehen.

Die gezeigten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern zugelassen.

Baylis
MEDICAL

Baylis Medical Company Inc.
5959 Trans-Canada Highway
Montreal, QC Canada H4T 1A1

Tel.: (514) 488-9801 / Fax: (514) 488-7209
www.baylismedical.com / info@baylismedical.com