



Fil-guide
spiralé
ProTrack^{MC}

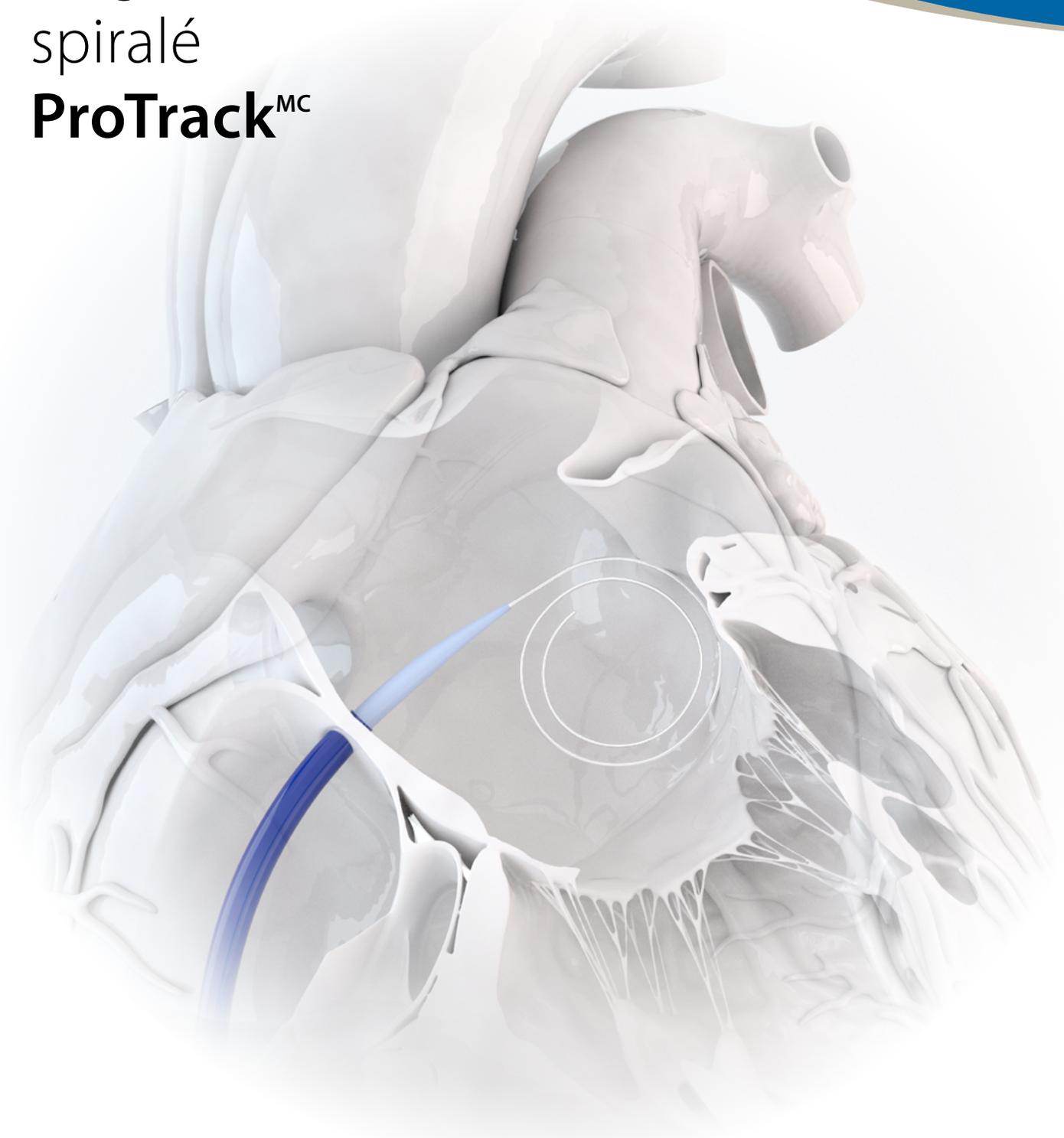

ANCRAGE INSTANTANÉ. ACCÈS SÉCURISÉ.^{MC}

Fil-guide spiralé ProTrack^{MC}

La pointe spiralée flexible permet d'accéder efficacement à l'oreillette gauche et de maintenir cet accès. Facilite l'échange de gaines de gros calibres et agit comme un coussin lors du contact avec la paroi de l'oreillette gauche.

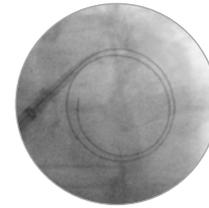


Fil radio-opaque




Gagnez du temps

Introduction plus rapide des dispositifs dans l'oreillette gauche.¹ Il suffit de déployer le fil-guide spiralé pour s'ancrer instantanément dans l'oreillette gauche.

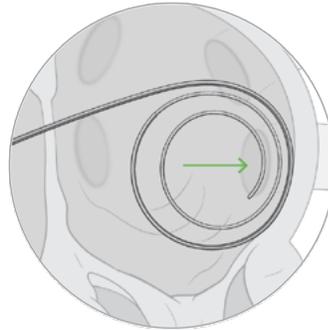

Coussin flexible

La pointe atraumatique flexible agit comme un coussin lors du contact avec la paroi de l'oreillette gauche.

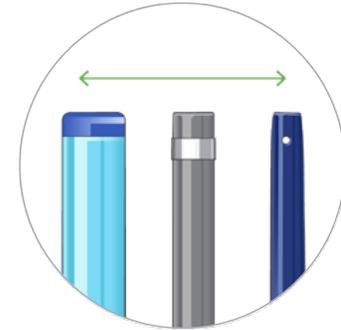

Échange et soutien

Grâce à sa rigidité, le fil-guide spiralé facilite l'échange de gaines ayant un diamètre large et permet de stabiliser la gaine.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristique	Spécifications
Diamètre externe	0,025 po
Longueur totale	175 cm, 230 cm
Longueur fonctionnelle d'échange	152 cm, 207 cm
Longueur du ressort spiralé	13 cm
Diamètre du fil-guide spiralé	4,1 cm
Matériau du corps principal	Acier inoxydable
Matériau de l'extrémité spiralée	Acier inoxydable

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Longueur totale	Numéro de produit
175 cm	PTW-25-175
230 cm	PTW-25-230

¹Buchner S, et al. J Interv Cardiol. doi: 10.1111/joic.12224

PRM-00041 FR J-1,2,3 V-4 © Tous droits réservés Baylis Médicale Cie, inc., 2013-2020. Baylis Médicale Cie, inc. se réserve le droit de modifier les spécifications ou d'intégrer des modifications de conception sans préavis et sans encourir aucune obligation relative aux équipements fabriqués ou fournis antérieurement. ProTrack, 'ANCRAGE INSTANTANÉ. ACCÈS SÉCURISÉ' et le logo de Baylis Médicale sont des marques de commerce ou des marques déposées de Baylis Médicale Cie, inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Brevets en instance et/ou accordés. ATTENTION: La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de ces dispositifs à un médecin ou sur prescription médicale. Avant toute utilisation, consulter les étiquettes et feuillets des produits pour connaître les indications, les contre-indications, les risques, les avertissements, les mises en garde et les directives d'utilisation.