



Gaine transseptale  
**TorFlex<sup>MC</sup>**

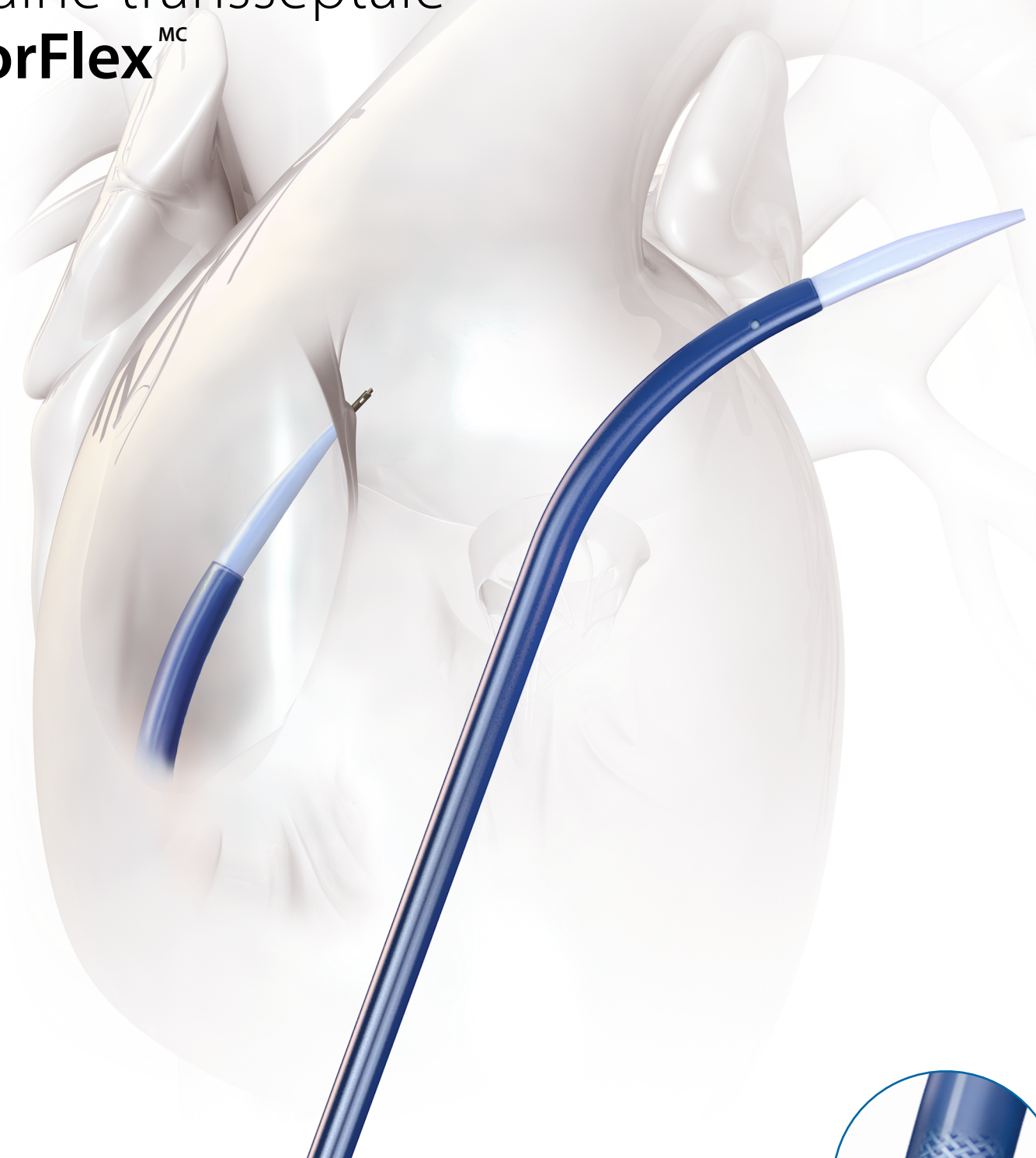


FRANCHISSEMENT CONTRÔLÉ ET EN DOUCEUR.<sup>MC</sup>

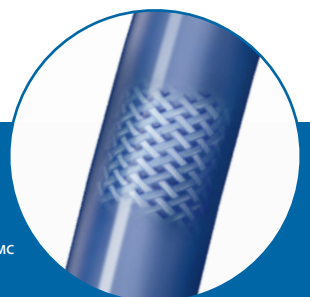


# Gaine transeptale **TorFlex**<sup>MC</sup>

Baylis Médicale s'emploie à innover dans le domaine des ponctions transeptales. Nos produits transeaux sont conçus pour permettre une ponction transeptale contrôlée et en douceur.

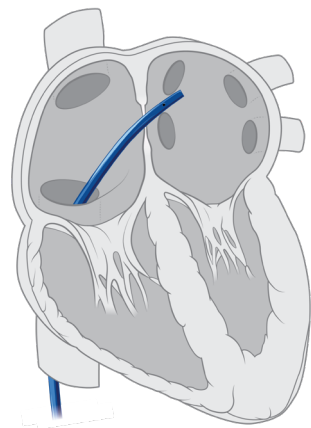


Courbe de **37°**

Oreillette gauche — Postérieure

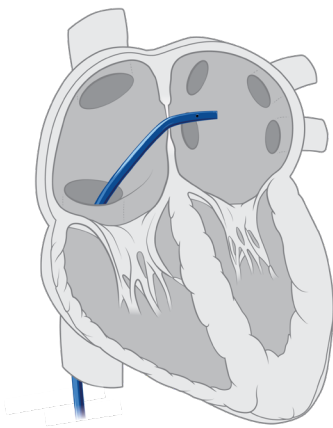


Courbe de **45°**

Oreillette gauche — Postérieure

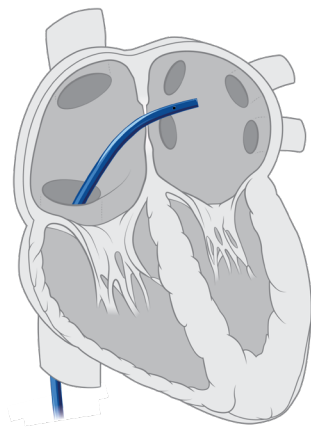


Courbe de **55°**

Oreillette gauche — Postérieure

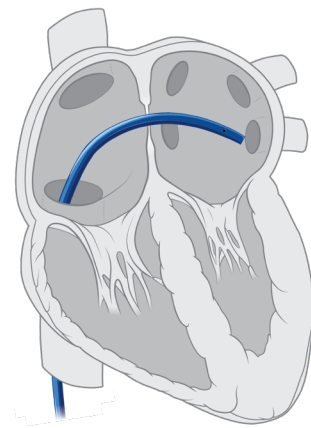

Courbe de **90°**


Oreillette gauche — Inférieure

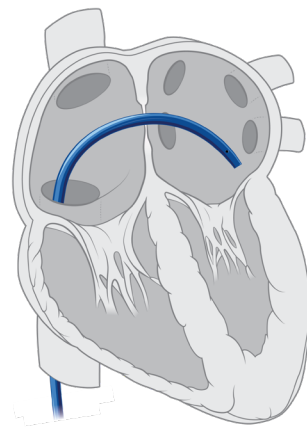

Courbe de **135°**

Oreillette gauche — Inférieure

Mécanisme de connexion à verrouillage fiable et cohérent

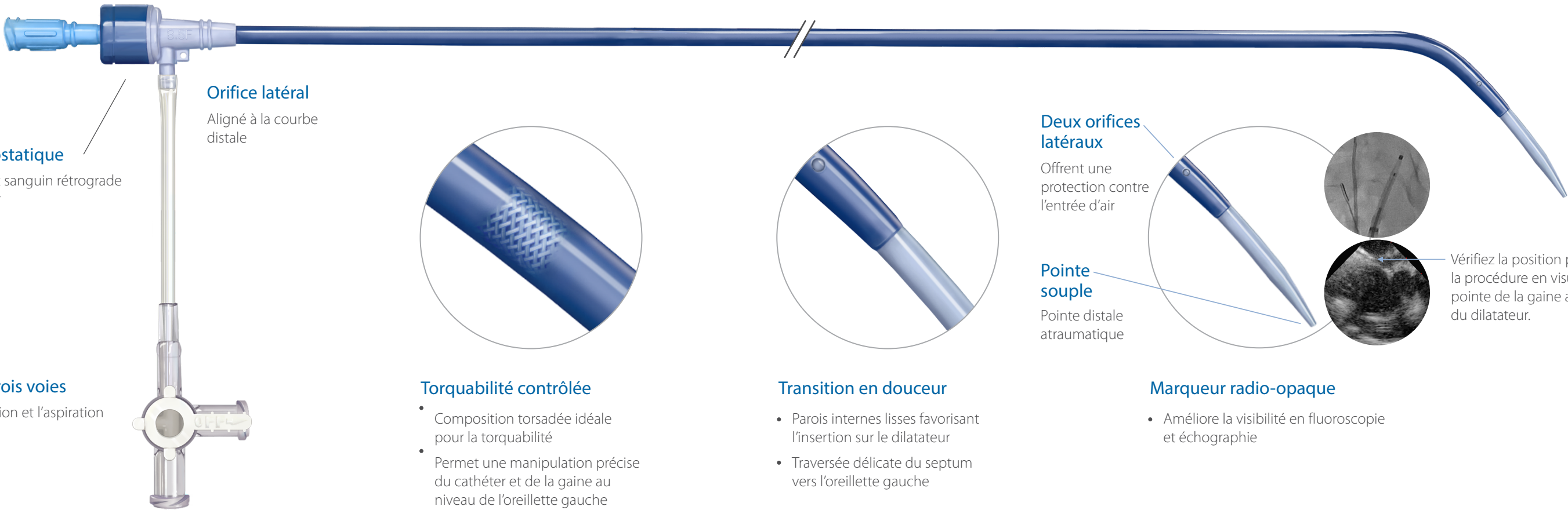


## Valve hémostatique

Prévient le flux sanguin rétrograde et l'entrée d'air


## Orifice latéral

Aligné à la courbe distale

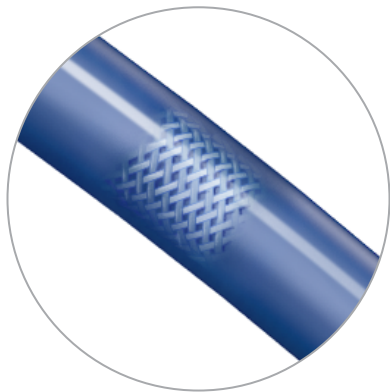

## Torquabilité contrôlée

- Composition torsadée idéale pour la torquabilité
- Permet une manipulation précise du cathéter et de la gaine au niveau de l'oreillette gauche

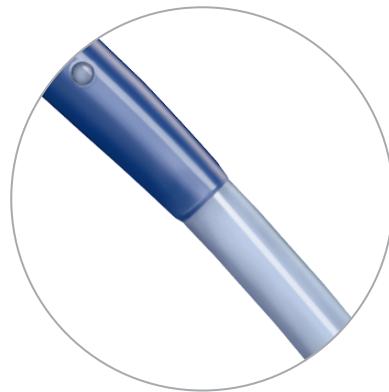

## Transition en douceur


- Parois internes lisses favorisant l'insertion sur le dilateur
- Traversée délicate du septum vers l'oreillette gauche

## Deux orifices latéraux

Offrent une protection contre l'entrée d'air

## Pointe souple

Pointe distale atraumatique

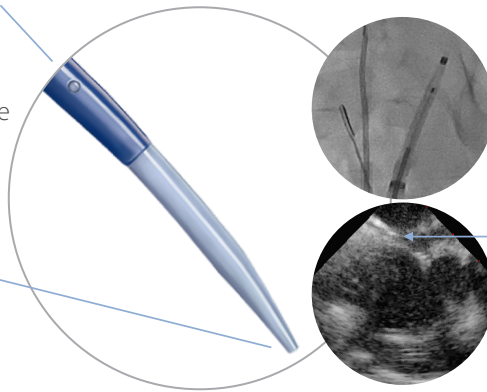

## Marqueur radio-opaque

- Améliore la visibilité en fluoroscopie et échographie

Vérifiez la position pendant la procédure en visualisant la pointe de la gaine ainsi que celle du dilateur.

# Gaine transeptale **TorFlex**<sup>MC</sup>

## SPÉCIFICATIONS


| Caractéristique                      | Spécification              |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Taille compatible                    | 8,5F (2,84 mm)             |
| Longueur utilisable de la gaine      | 63 cm, 81 cm               |
| Marqueur radiopaque                  | Bande de platine/d'iridium |
| Courbes de la gaine                  | 37°, 45°, 55°, 90°, 135°   |
| Longueur utilisable du dilateur      | 67 cm, 85 cm               |
| Diamètre interne du dilateur         | 0,033 po (0,83 mm)         |
| Diamètre extérieur max. du fil-guide | 0,032 po (0,81 mm)         |
| Longueur du fil-guide                | 180 cm                     |

## COURBES

### Courbe prononcée



### Courbe peu prononcée

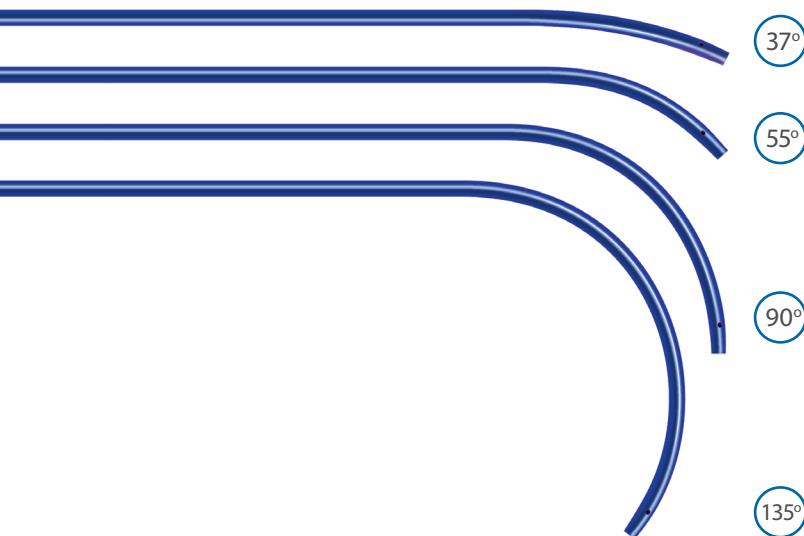

## POUR COMMANDER

| Taille compatible | Diamètre extérieur maximal du fil-guide |    | Longueur utilisable de la gaine |    | Courbe de la gaine |     |
|-------------------|-----------------------------------------|----|---------------------------------|----|--------------------|-----|
|                   |                                         |    |                                 |    |                    |     |
| TF85              | -                                       | 32 | -                               | 63 | -                  | 37  |
| TF85              | -                                       | 32 | -                               | 63 | -                  | 45  |
| TF85              | -                                       | 32 | -                               | 63 | -                  | 55  |
| TF85              | -                                       | 32 | -                               | 63 | -                  | 90  |
| TF85              | -                                       | 32 | -                               | 63 | -                  | 135 |
| TF85              | -                                       | 32 | -                               | 81 | -                  | 45  |
| TF85              | -                                       | 32 | -                               | 81 | -                  | 55  |



PRM-00107 FR J-1,2,3 V-8 © Tous droits réservés Baylis Médicale Cie, inc., 2012-2022. Baylis Médicale Cie, Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications ou d'intégrer des modifications de conception sans préavis et sans encourir aucune obligation relative aux équipements fabriqués ou fournis antérieurement. TorFlex, 'Utilisation contrôlée et transition en douceur', et le logo de Baylis Médicale sont des marques de commerce ou des marques déposées de Baylis Médicale Cie, inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. ATTENTION: La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de ces dispositifs à un médecin ou sur prescription médicale. Avant toute utilisation, consulter les étiquettes et feuillets des produits pour connaître les indications, les contre-indications, les risques, les avertissements, les mises en garde et les directives d'utilisation.

Les produits présentés ne sont peut-être pas approuvés dans toutes les juridictions.

**Baylis**  
MEDICAL

Baylis Médicale Cie, inc.  
5959 route Transcanadienne  
Montréal, QC Canada H4T 1A1

Tél.: (514) 488-9801 / Téléc: (514) 488-7209  
www.baylismedical.com / info@baylismedical.com