
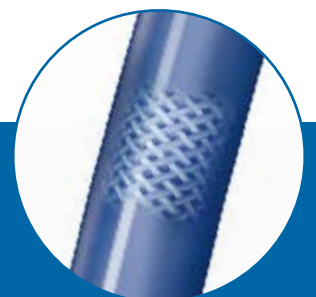


TorFlex


Transseptale Führungsschleuse

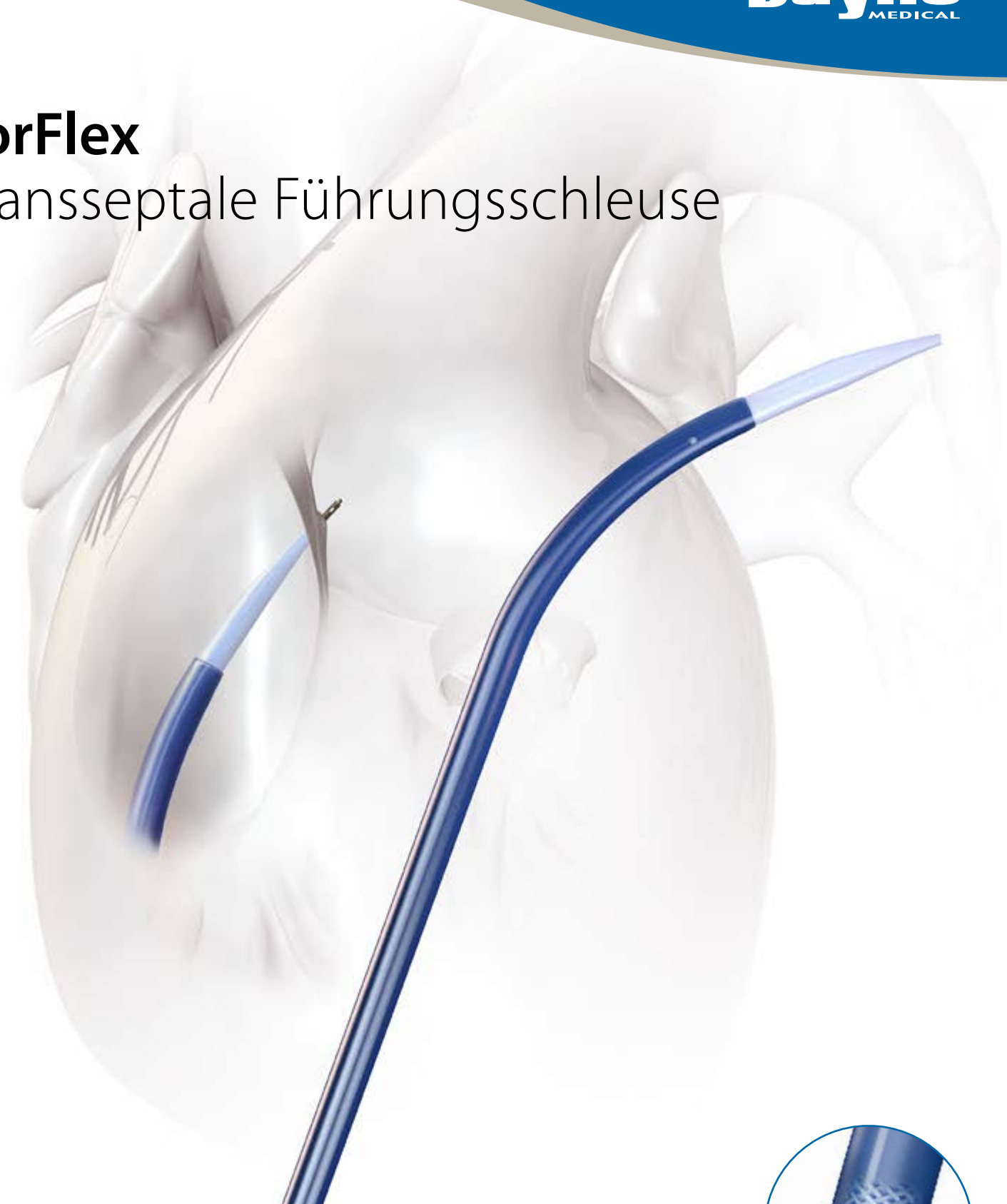


STUFENLOSER UND KONTROLLIERTER ÜBERGANG

TorFlex Transseptale Führungsschleuse

Baylis Medical widmet sich innovativen Lösungen für transseptale Punktionen. Unsere transseptalen Produkte sind für eine glatte und kontrollierte transseptale Punktion ausgelegt.

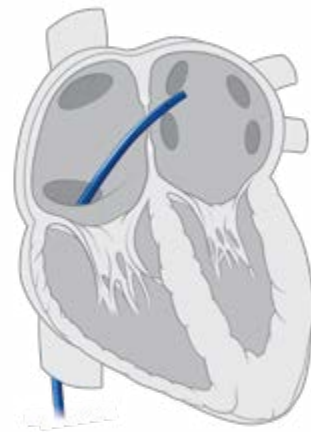


37° Krümmung
Linker Vorhof — posterior

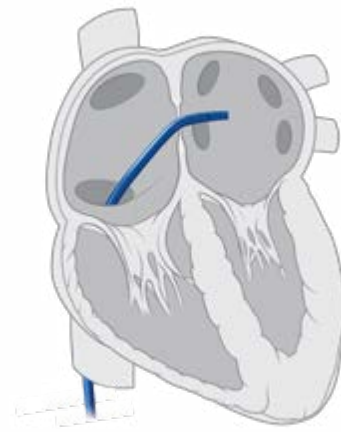


45° Krümmung
Linker Vorhof — posterior



55° Krümmung
Linker Vorhof — posterior

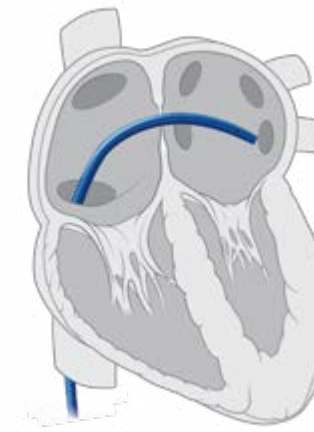


90° Krümmung
Linker Vorhof — inferior

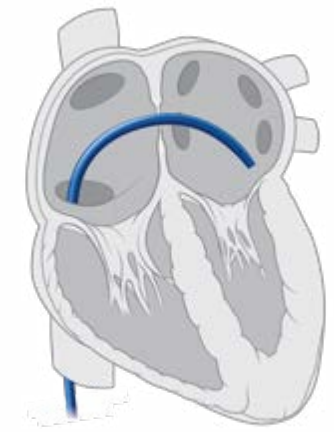

135° Krümmung
Linker Vorhof — inferior

Einrastender Dilatator


Sichert den Dilatator in der Schleuse

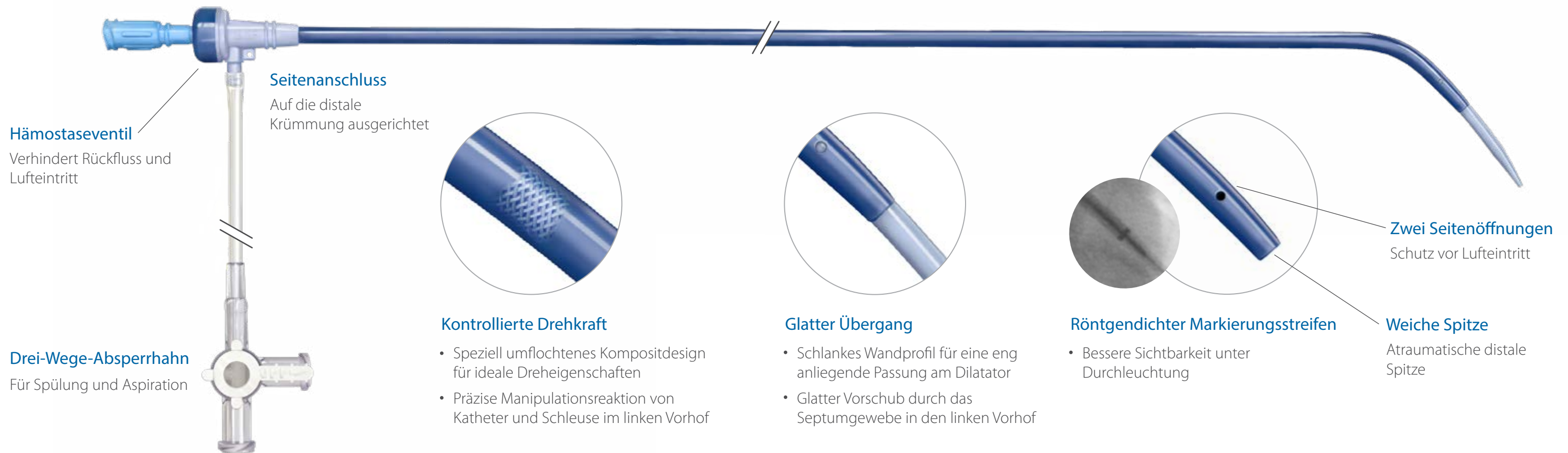

Hämostaseventil
Verhindert Rückfluss und Lufteintritt

Seitenanschluss

Auf die distale Krümmung ausgerichtet

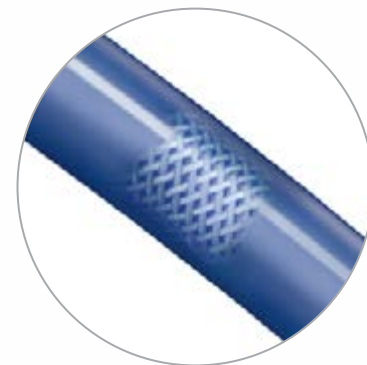


Kontrollierte Drehkraft

- Speziell umflochtenes Kompositdesign für ideale Dreheigenschaften
- Präzise Manipulationsreaktion von Katheter und Schleuse im linken Vorhof



Glatter Übergang

- Schlankes Wandprofil für eine eng anliegende Passung am Dilatator
- Glatter Vorschub durch das Septumgewebe in den linken Vorhof

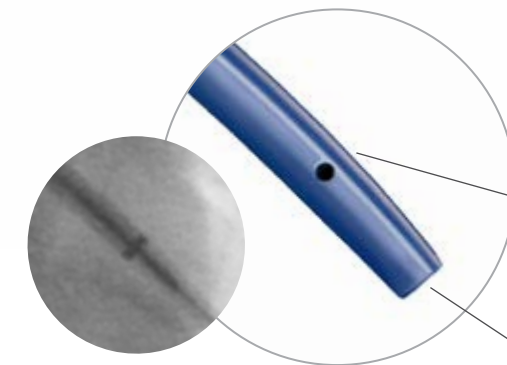

Röntgendichter Markierungstreifen

- Bessere Sichtbarkeit unter Durchleuchtung

Zwei Seitenöffnungen
Schutz vor Lufteintritt

Weiche Spitze

Atraumatische distale Spitze

Drei-Wege-Absperrhahn
Für Spülung und Aspiration

TorFlex Transseptale Führungsschleuse

Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation
Kompatibel mit den French-Größen	8,5 F (2,84 mm)
Nutzlänge der Schleuse	63 cm, 81 cm
Röntgendichte Markierung der Schleuse	Platin-/Iridiumstreifen
Schleusenkrümmungen	37°, 45°, 55°, 90°, 135°
Nutzlänge des Dilatators	67 cm, 85 cm
Innendurchmesser des Dilatators	0,83 mm (0,033 Zoll)
Max. Außendurchmesser des Führungsdrahts	0,81 mm (0,032 Zoll)
Länge des Führungsdrahts	180 cm

Bestellinformationen

Kompatibel mit den French-Größen

		Max. Außendurchmesser des Führungsdrahts		Nutzlänge der Schleuse		Schleusenkrümmung	
TF85	-	32	-	63	-	37	
TF85	-	32	-	63	-	45	
TF85	-	32	-	63	-	55	
TF85	-	32	-	63	-	90	
TF85	-	32	-	63	-	135	
TF85	-	32	-	81	-	45	
TF85	-	32	-	81	-	55	

Krümmung

Spitzwinklige Krümmung



45°

Glatte Krümmung



37°



55°



90°



135°



PRM-00107 DE J-0 V-6 © Copyright Baylis Medical Company Inc., 2012-2021. Baylis Medical Company Inc. behält sich Änderungen an Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung und ohne jegliche Verpflichtung bezüglich zu einem früheren Zeitpunkt hergestellten oder ausgelieferten Produkten vor. TorFlex, 'STUFENLOSER UND KONTROLLIERTER ÜBERGANG' und das Logo von Baylis Medical sind Marken oder eingetragene Marken von Baylis Medical Company Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. VORSICHT: In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden. Vor Gebrauch die Produktauszeichnung und die Packungsbeilagen auf Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warn- und Vorsichtshinweise sowie Gebrauchsanweisungen durchsehen.

Die gezeigten Produkte dürfen nicht in allen Ländern zugelassen werden.

Baylis
MEDICAL

Baylis Medical Company Inc.
5959 Trans-Canada Highway
Montreal, QC Canada H4T 1A1

Tel.: (514) 488-9801 / Fax: (514) 488-7209
www.baylismedical.com / info@baylismedical.com